

Nouveau

Lingettes nontissées, imprégnées, jetables, détergentes et désinfectantes.

Discovery 1500

...toujours prêtes,

pour le bio nettoyage des surfaces portées
en champ hospitalier.

ELABORE
SOUS CONTROLE
PHARMACEUTIQUE



Pour les professionnels, c'est clair et net !



La solution aux exigences pour le bio nettoyage

La propreté esthétique, c'est l'absence de déchets, de salissures, de poussières : nous pouvons la contrôler à l'œil nu. La propreté hygiénique, c'est entrer dans une autre dimension - l'invisible - et lutter contre les infections hospitalières, appelées infections nosocomiales, qui touchent 5 à 12% des malades hospitalisés en Europe.

- Produit gain de temps, 2 en 1, prêt à l'emploi et résistant.
- Lingette sûre à l'utilisation : dosage optimisé de la solution.
- Efficacité de détergence et de désinfection (solution extraite de la lingette, certifiée bactéricide et fongicide).
- Réduit le nombre de micro organismes pathogènes résistants, à l'origine des bio contaminations.
- Limite les risques de contamination croisée (produit jetable).



Facilement inflammable.

F



Irritant.

Xi

Une efficacité sous haute surveillance.

- Qualité du nontissé répondant aux exigences de résistance et de durabilité requises par l'utilisation.
- Lingette élaborée et testée sous contrôle pharmaceutique.
- Des performances de **détergence** : la formule contient des tensioactifs et un alcool dégraissant.
- Un produit conforme aux normes en vigueur sur le marché.

Activité anti-microbienne de la solution d'imprégnation conformément aux normes :

Bactéricidie : EN1040 (1 min.) ;
Afnor NF T 72-151, spectre 4 ; Afnor NF T 72-171 spectre 4 (protéines, conditions de propreté) ;
Afnor T 72-301 / 171 spectre 4 (eau dure 30°F) ;
T 72-301 / 151 (Mycobacterium tuberculosis).

Fongicidie : EN 1275 (Candida albicans 5 min.) ;
Afnor NF T 72-201 (Candida albicans, Penicillium verrucosum, Cladosporium cladosporioides).


Virucidie : Afnor NF T 72-180 (adenovirus type 5).

Activité anti-microbienne des lingettes conformément à la norme AFNOR :

Bactéricidie : NF T 72-190, spectre 4.

Fongicidie : NF T 72-190, sur Candida albicans.

- Un produit qui va plus loin que les normes en performances **bactéricidie** et **fongicidie** : réduction de 6 log (1.000.000 fois) en seulement 5 minutes, la norme exigeant une réduction d'au moins 5 log (100.000 fois) en 15 minutes.

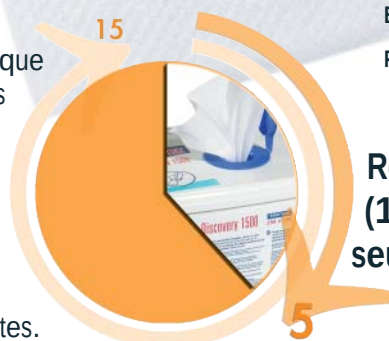

**Réduction de 6 log
(1.000.000 fois) en
seulement 5 minutes.**

Pratiques d'hygiène en champ hospitalier des surfaces portées.



La sécurité d'utilisation.

- Prédosée, la lingette évite les risques de sous-dosage (inefficacité) ou de surdosage de produit (surcoût).
 - Le personnel est moins exposé aux risques d'éclaboussures de produits chimiques.
 - Pas d'interaction chimique support-solution, garantie par le procédé de fabrication du nontissé (thermoliage).
- A noter : dans les protocoles classiques, l'activité de désinfection peut être amoindrie par une interaction chiffon-solution.

Une hygiène supérieure.

- Produit jeté après usage, diminuant les risques de contamination croisée.
- Efficacité certifiée, en utilisation, de la solution extraite de la lingette (bactéricidie, fongicidie).
- Désinfection de toutes les surfaces en contact, dont les gants.
- Effet rémanent : déchets propres, pas de risque de contamination des autres déchets.

Discovery 1500 réduit le coût global en offrant une méthode plus rapide, plus pratique tout en obtenant un niveau d'hygiène et de sécurité plus élevé.

Un produit économique.

- Une réponse concrète pour réduire les coûts de nettoyage (80% du coût en main d'œuvre).
- Gain de temps : le pré-dosage offre un gain de productivité (plus de perte de temps liée au dosage manuel).
- Lingette imprégnée pour deux actions en simultanée : détergence et désinfection.
- Dosage maîtrisé.

Un produit ergonomique.

- Lingettes prêtes à l'emploi.
- Travail facilité et rationalisé par rapport au chiffon+spray.
- Système de prédécoupe pour une facilité d'utilisation jusqu'à la dernière lingette.

Le respect de l'environnement.

Maîtrise de la consommation de détergent / désinfectant.

Un conditionnement bien étudié.

- Le seau de 180 lingettes est adaptable sur les chariots.
- Son format rectangulaire permet un stockage facile.
- Il est sûr et hygiénique :
- Etanchéité contrôlée.
- Opercule spécialement étudié pour faciliter l'extraction des lingettes.



Descriptif :

Lingette en nontissé thermolié (85% polypropylène, 15% viscose), imprégnée d'une solution détergente, désinfectante.

Composition de la solution :

Acide benzoïque, ammonium quaternaire, éthanol, parfum citron, inhibiteur de corrosion.

Mode d'emploi :

Tirer horizontalement la lingette jusqu'à la prédécoupe, l'incliner puis la détacher. Refermer le contenant pour éviter tout dessèchement. Frotter la surface à traiter. Ne pas rincer. Si la lingette n'est pas pré-sortie, ouvrir le contenant et réamorcer.

Précaution d'emploi :

L'utilisation des lingettes ne dispense pas du protocole de nettoyage et ne remplace en aucun cas la stérilisation quand elle est requise. Certains plexiglas sont sensibles à l'alcool, procéder à un essai préalable. Port de gants conseillé.

R10 : Inflammable. R36 / 38 : Irritant pour la peau et les yeux. S16 : Conserver à l'écart de toute flamme ou source d'étincelle. Ne pas fumer. S24 : Éviter le contact avec la peau. S26 : En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment avec de l'eau et consulter un spécialiste. Pour tout renseignement complémentaire, se référer à la fiche de données de sécurité ou contacter notre Service Technique Clients.

Lieux et types d'utilisation :

Discovery est recommandé pour le nettoyage en zones 2 et 3 des surfaces carrelées, stratifiées, peintes (portes, murs...), métalliques (inox, peintes, chromées)...

Limites d'utilisation :

Discovery 1500 n'est pas préconisé pour l'usage médical. Ne pas utiliser pour un usage en contact direct avec le patient. Ne convient pas au nettoyage des dispositifs médicaux. Discovery 1500 est déconseillé sur les surfaces métalliques abîmées oxydables, sur les vitres et prohibé sur le marbre.



Désignation	Code	Descriptif	Dimensions Grammage (mm - g/m ²)	Couleur	PCB
  Discovery 1500	95001500	Lingette imprégnée	250x205 45	Blanc	4 seaux / carton 180 lingettes / seau

Discovery : marque déposée Spontex Professionnel.

Compte-tenu de la nature des produits, les dimensions indiquées correspondent à des valeurs moyennes.

DISTRIBUÉ PAR :



SPONTEX PROFESSIONNEL
57, rue de Villiers
B.P. 190
F-92205 Neuilly-sur-Seine Cedex
Tél. : (33) 1 49 64 22 00
Fax : (33) 1 49 64 24 39

www.spontex-professionnel.com

